


Ο Therapeutic Orofacial Massager ενεργοποιείται με μπαταρία ΑΑ, έχει λάβει πιστοποίηση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει κατασκευαστεί με υλικό που προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία.

Ο Therapeutic Orofacial Massager σχεδιάστηκε από την εταιρία Δ. Ψωμόπουλος & Σία Ο.Ε. και κατασκευάστηκε από την εταιρεία KALFOPLAST A.E. - Θεσσαλονίκη



μοναδικό και αποτελεσματικό

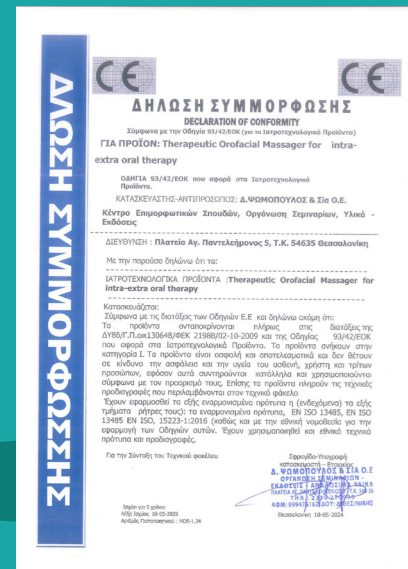

THERAPEUTIC OROFACIAL MASSAGER

For inter - external therapy

The Therapeutic Orofacial Massager is powered by an AA battery, has CE certification according to European legislation and is made of a material that offers antimicrobial protection. Designed by D. Psomopoulos & Co. and manufactured by KALFOPLAST SA - Thessaloniki



Δ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Pl. Ag. Panteleimon 5, 54635 Thessaloniki, Τηλ. 2310 219 990
e-mail: info@kesp.edu.gr www.kesp.edu.gr

Για την ενίσχυση ή και χαλάρωση του στοματοπροσωπικού μυϊκού συστήματος

Therapeutic Orofacial Massager for intra-extra oral therapy

Ο θεραπευτικός στοματοπροσωπικός μαλάκτης (Therapeutic Orofacial Massager) είναι μία λογοθεραπευτική συσκευή με ηλεκτρική ενεργοποίηση (μπαταρία) που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στοματοπροσωπικού συστήματος για την ενίσχυση (έσω-στοματικά και έξω-στοματικά) ή τη χαλάρωση των στοματοπροσωπικών μυών.

Η σχεδίαση και κατασκευή του βασίζεται σε μακροχρόνια ενασχόληση και εμπειρία στην αντιμετώπιση των μυολειτουργικών διαταραχών του στοματοπροσωπικού μυϊκού συστήματος. Κάθε εξάρτημα του έχει διαφορετική λειτουργία και στοχεύει στην ενεργοποίηση ή χαλάρωση συγκεκριμένων μυών ή μυϊκών συστημάτων. Τα εξαρτήματα του Therapeutic Orofacial Massager είναι μοναδικά στο είδος τους και έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν το θεραπευτικό έργο.

The Therapeutic Orofacial Massager is a battery-powered speech therapy device used during the treatment of the orofacial system to either enhance or relax the orofacial muscles intraorally and extraorally.

Its design and construction are based on long-term engagement and experience in addressing myofunctional disorders of the orofacial muscular system. Each component has a different function, targeting the activation or relaxation of specific muscles or muscle systems. The components of the Therapeutic Orofacial Massager are unique and designed to facilitate therapeutic work.

Το σετ περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξαρτήματα, τα οποία προσαρμόζονται γρήγορα στη συσκευή ώστε να μην καθυστερεί η θεραπευτική διαδικασία



Σπάτουλα: αποτελεί παγκόσμια καινοτομία, καθώς σε αυτό προσαρμόζεται ξύλινο γλωσσοπίεστρο μίας χρήσης, το οποίο μετά τη χρήση δεν χρειάζεται απολύμανση, αλλά απλή αντικατάσταση, εξοικονομώντας χρόνο και εργασία στον θεραπευτή. Η χρήση του αφορά στη χαλάρωση ή ενίσχυση των ενδοστοματικών παρειακών μυών (μασητήριων), καθώς και των μυών της γλώσσας και των χειλιών.



Μπίλια: χρησιμοποιείται τοπικά για την ενίσχυση ή χαλάρωση των περιστοματικών μυών. Σε περίπτωση ενδοστοματικής χρήσης, πρέπει να απολυμαίνεται.



Δίσκος: χρησιμοποιείται για τη μάλαξη και χαλάρωση των περιστοματικών και προσωπικών μυών (παρειές, γενειοακός μυς). Η μάλαξη των παρειακών μυών γίνεται κατά την φορά των μυών.



Ακροπιεστής: χρησιμοποιείται τοπικά για την ενίσχυση ή χαλάρωση των εξωτερικών μυών του εδάφους του στόματος.



The set includes four (4) attachments, which can be quickly fitted to the device to avoid delaying the therapeutic process:

- The **Spatula** attachment is a global innovation as it accommodates a disposable wooden tongue depressor, which, after use, does not require disinfection but simple replacement with another disposable tongue depressor, saving the therapist time and effort. It is used to relax or strengthen the intraoral buccal muscles (masticatory), as well as the tongue and lip muscles.
- The **Ball** attachment is used locally to enhance or relax the perioral muscles. If used intraorally, it must be disinfected.
- The **Disc** attachment is used for massaging and relaxing the perioral and facial muscles (cheeks, chin muscle). The buccal muscle massage is performed in the direction of the muscles.
- The **Acupressor** attachment is used locally to enhance or relax the external muscles of the mouth floor.